

Ordering Information

医療従事者向け

製品名	カタログ番号	チューブ径	細径部外径	全長	チューブ長	プジョー挿入口位置	細径部長
LACRIFAST CL (スタンダードtype)	LF2-CL105	1.0 (内径0.5)	0.7	105	40	30	—
LACRIFAST CL (ショートtype)	LF2-CL090			90	32.5	24	—
LACRIFAST CL (ショートtype) プジョーなし	LF2-CL090B					—	—
LACRIFAST EX (スタンダードtype)	LF2-X105	1.5 (内径0.5)	0.8	105	40	30	—
LACRIFAST EX (ショートtype)	LF2-X090			90	32.5	24	—
LACRIFAST ESII (ミニtype) プジョーなし	LF3-ES080B	1.4 (内径1.1)	0.8	80	26	—	28
LACRIFAST ESII (ショートtype) プジョーなし	LF3-ES090B			90	28.5	—	30

STERILE EO

エチレンオキサイドガス滅菌済

再使用、再滅菌しないでください。

使用上の注意・必ず添付文書をご覧ください。

ロート製薬

医療機器サイト

【製品に関するお問い合わせ】

<販売元>
ロートニッテン株式会社
サージカル事業推進部
tel.03-5408-5305 fax.03-3431-6636
<製造販売元>
ロート製薬株式会社

【価格・ご注文に関するお問い合わせ】

ファイバーテック株式会社
マーケティング本部
tel.03-5259-7601 fax.03-5259-1155




RN ロートニッテン株式会社

最適のスペックが選べるラクリファーストシリーズ4種。

保険医療材料請求区分：涙液・涙道シリコンチューブ

LACRIFAST CL

ブジーあり

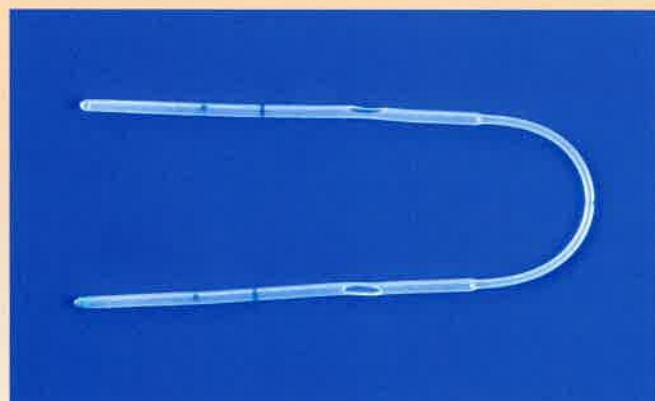


■チューブ先端の盲端化により先端ステンレスリングなしのタイプを実現。




LACRIFAST EX

ブジーあり

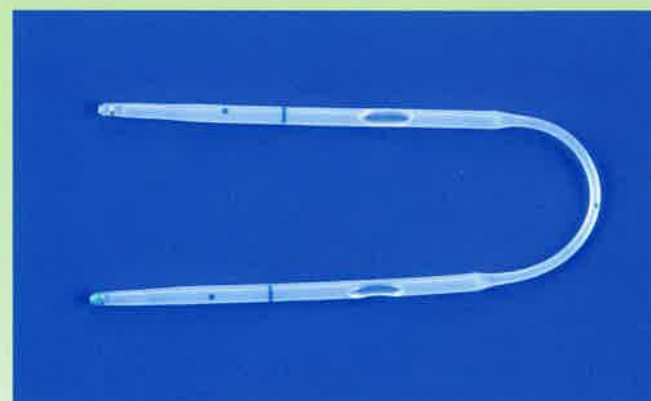


■ブジーによる突き抜け防止対策としてチューブ先端部にステンレスリングを配置。

■チューブ径1.5mmの太径肉厚により、先端リングをチューブ樹脂に包埋一体化。

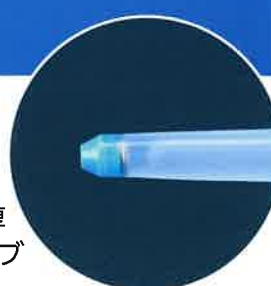

LACRIFAST CL

ブジーなし

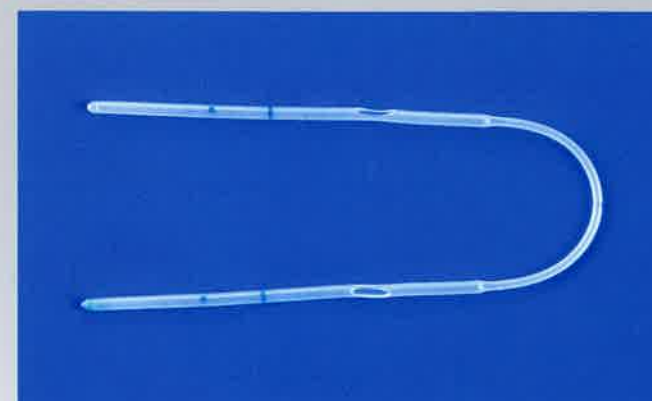

■チューブ先端の盲端化により先端ステンレスリングなしのタイプを実現。



LACRIFAST ESII

ブジーなし



■チューブ材料にカネカ社開発の素材であるSIBS*とポリウレタンの混合樹脂を採用。柔軟性を維持しつつ破断強度を追求した設計。

*スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体

■チューブ先端は開放端でチューブ内腔に体液等が溜まりにくい構造。



3品共通スペック

■チューブ材料にカネカ社開発の素材であるSIBS*とポリウレタンの混合樹脂を採用。

柔軟性を維持しつつ破断強度を追求した設計。*スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体

■スムーズな挿入のために、チューブ表面に親水性コーティングを加工。

■チューブ先端部の色が異なるため、鼻内視鏡下でのチューブ操作に役立つ。

■挿入位置の目安としてチューブ先端から10mm、15mmの位置に青色マーク付。

■チューブ先端を遊ばせて挿入する際の目安としてブジーには3カ所のマーク付。

販売名	LACRIFAST涙道チューブ EY-N2
医療機器認証番号	226ADBZX00221Z00
JANコード	(スタンダードtype) 4987241171002
	(ショートtype) 4987241170982



販売名	LACRIFAST涙道チューブ EY-N2
医療機器認証番号	226ADBZX00221Z00
JANコード	(スタンダードtype) 4987241171057
	(ショートtype) 4987241171026



販売名	LACRIFAST涙道チューブ EY-N2
医療機器認証番号	226ADBZX00221Z00
JANコード	(ショートtype)ブジーなし 4987241171088



販売名	LACRIFAST涙道チューブ EY-N3
医療機器認証番号	231ADBZX00023Z00
JANコード	(ミニtype)ブジーなし 4987241171118
	(ショートtype)ブジーなし 4987241171132

