


従来不可能であった、涙道内腔の観察を可能にします。

- ・ 穿破の前に涙道閉塞病変の位置、状態を観察、確認することが可能です。
- ・ 涙管チューブ挿入術前後の確認ができ、処置の有用性と安全性を高めます。
- ・ チャンネルを使用し、内視鏡下の直接的な涙洗が可能です。
- ・ タイプMD10より近距離～中距離の観察がしやすくなりました。(CK10)。
- ・ 挿入部をテーパ設計にすることで、高い挿入性とトルク追従性を備えました。(MT3・MT3TB)
- ・ 先端部に2ヶ所のベント部を設けることにより、今まで観察が困難であった症例にも観察の可能性が広がりました。(CK10TB・FK10TB・MD10TB・MT3TB)
- ・ 専用の画像装置と組み合わせて使用します。

涙道ファイバースコープ Ruido Fiberscope

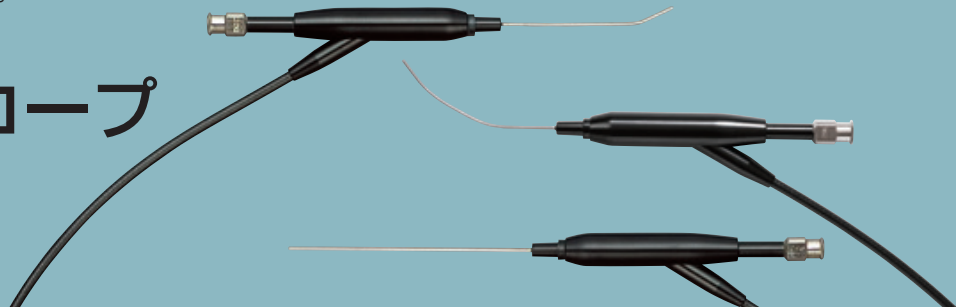

仕様

視野角60° ■ 標準画質タイプ ■

挿入部先端形状	商品番号	タイプ	挿入部標準 外径 [mm]	挿入部最大 外径 [mm]	挿入部有効 長 [mm]	チャンネル 内径 [mm]	全長 [mm]
ベント(テーパー)	100-3060	MT3	0.7	1.0	50 ^{±1}	0.3	2800
ベント	100-0605	MD3	0.7	1.2			
	100-0606	MD10	0.9				
ツインベント	100-3061	MD10TB					
ツインベント(テーパー)	100-3062	MT3TB	0.7	1.0	70		
ストレート	100-0602	MD6S	1.0	1.3			

視野角70° ■ 高画質タイプ ■

挿入部先端形状	商品番号	タイプ	挿入部標準 外径[mm]	挿入部最大 外径[mm]	挿入部有効 長[mm]	チャンネル 内径[mm]	全長 [mm]
ベント	100-3170	CK10	0.9	1.2	50 ^{±1}	0.3	2800
	100-3171	FK10					
ツインベント	NEW 100-3177	CK10TB					
	100-3172	FK10TB					

※1 挿入部有効長は55mm、63mmのタイプもございます。お問い合わせください。


■ 仕様・外観については、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 販売名: 涙道ファイバースコープ


■ 医療機器認証番号: 21400BZZ00022000

先端部形状


挿入性に優れた独自の先端部形状

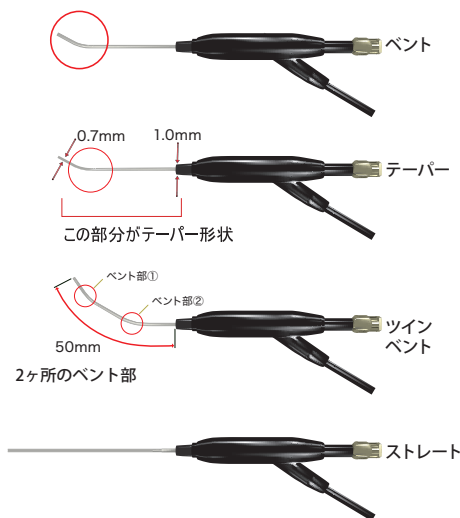

接続例

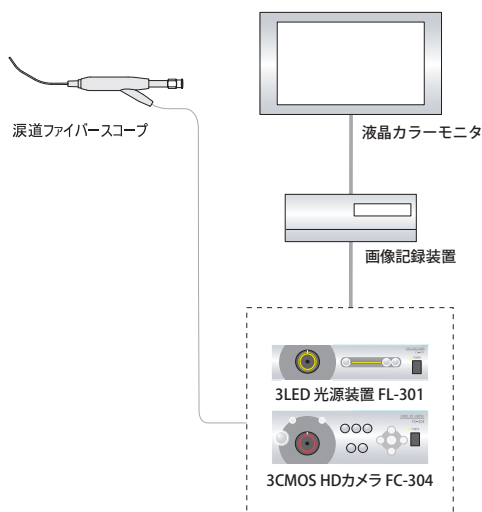

イメージ写真

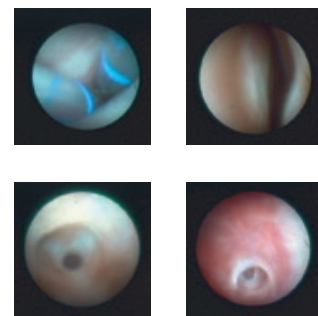

提供: 鈴木眼科クリニック 鈴木亨先生

製造販売元
ファイバートック株式会社 千葉県佐倉市西御門409-1

問い合わせ先
ファイバートック株式会社 マーケティング本部
東京都千代田区神田錦町3-23 TEL: 03-5259-7601 FAX: 03-5259-1155

代理店